


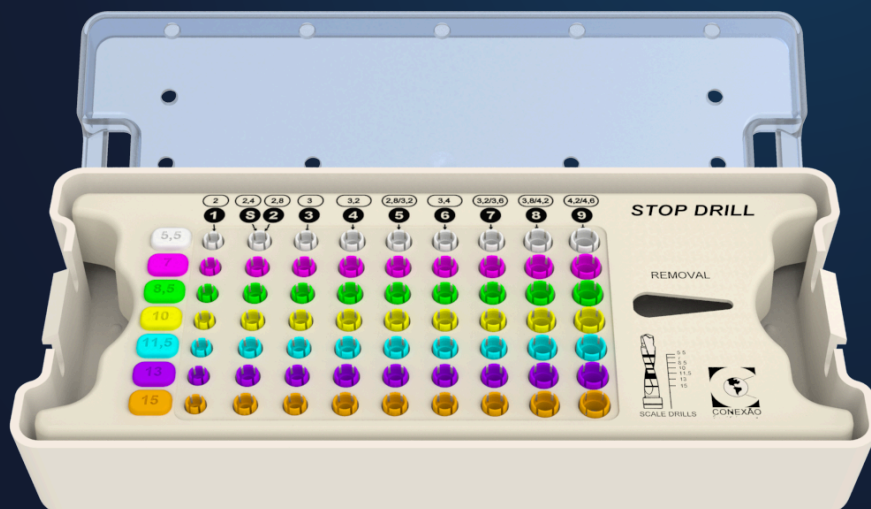

PRECISÃO QUE TRAVA NA FRESA

Um sistema de limitadores físicos que trava na fresa
e substitui a medição visual por marcas a laser,
garantindo fidelidade absoluta à
profundidade planejada.


Sumário

- Abertura 3
- Problema 3
- Solução 4
- Destaques 4
- Composição 4
- Integração 5
- Aplicação Comercial 5
- Fechamento 6

Abertura

Precisão Que Trava na Fresa

Um sistema de limitadores físicos que trava na fresa e substitui a medição visual por marcas a laser, garantindo fidelidade absoluta à profundidade planejada.

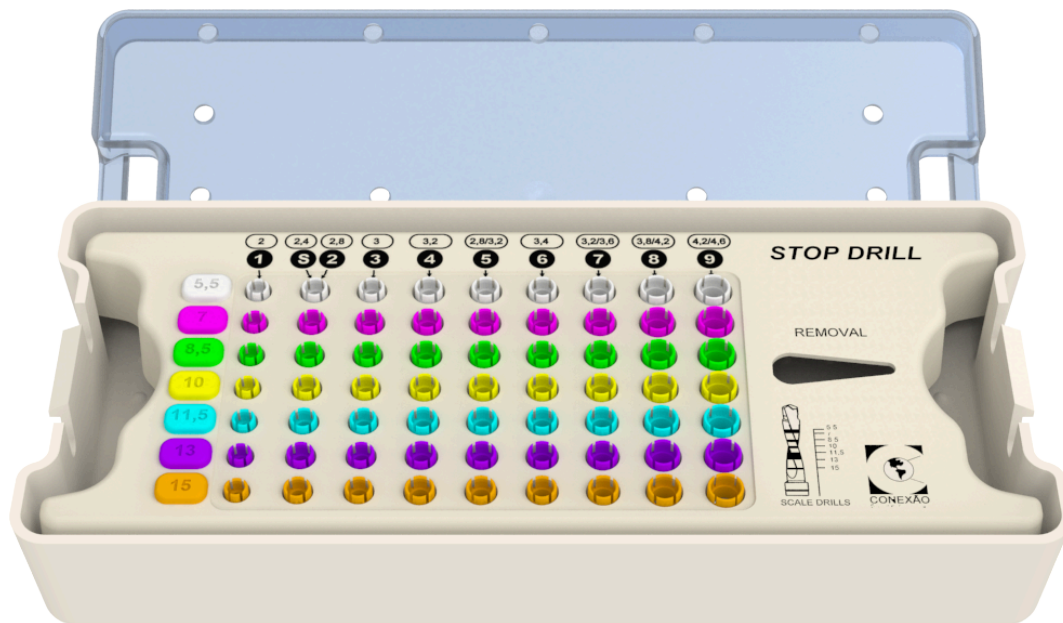

Precisão milimétrica travada na fresa, não no olho.

O Kit Stop Drill é posicionado pela Conexão Implantes como uma ferramenta de segurança ativa e previsibilidade cirúrgica. Ele remove a incerteza da medição visual (marcas a laser), permitindo que o cirurgião execute o planejamento reabilitador com fidelidade absoluta à profundidade estabelecida.

Para você, consultor, este material reúne o argumentário técnico e comercial completo do Kit Stop Drill: diferenciais de engenharia, composição, integração com os sistemas Master Flex e Start Flex, e o script de vendas para levar essa conversa ao dentista.

Problema

Hoje, a sequência de fresagem depende da leitura visual de marcas a laser na fresa para controlar a profundidade — uma tarefa que se torna especialmente difícil em campo cirúrgico sob sangramento e em regiões próximas ao nervo alveolar.

Essa dependência visual tem um custo mensurável: uma variação de apenas 1,5 mm por erro de leitura visual já é suficiente para comprometer o sucesso do carrega-

mento imediato ou a segurança do paciente. O risco não está na técnica do cirurgião, está na ausência de um limite físico que independa da visão.

Solução

O Kit Stop Drill substitui a leitura visual por um limitador físico que trava diretamente na fresa e impede qualquer avanço além da profundidade planejada. Não é mais uma questão de enxergar a marca certa sob sangramento — é uma questão de o instrumento parar exatamente onde o planejamento determinou.

Para a Conexão Implantes, o produto representa a união entre engenharia de materiais e facilidade operacional para o dentista: a mesma lógica de segurança do planejamento em software chega à mesa cirúrgica sem depender da percepção visual do operador.

Destaques

- **Material de engenharia (POM):** fabricado em Polioximetileno (Poliacetil), material de alta performance que suporta ciclos repetidos de autoclave sem sofrer deformações sob temperatura e umidade.
- **Baixa condutibilidade térmica:** o material POM protege a integridade do tecido ósseo durante a perfuração, minimizando o risco de superaquecimento por atrito.
- **Segurança de travamento:** cada stop é projetado para se prender firmemente à fresa correspondente, garantindo que o limitador não se desloque durante o ato operatório.
- **União de engenharia e praticidade:** o kit combina engenharia de materiais e facilidade operacional, entregando ao dentista uma ferramenta tão simples de usar quanto segura.

Composição

A caixa organizadora espelha a sequência dos kits cirúrgicos: identificação dual, com o número da fresa em negrito e o diâmetro em itálico, e codificação por cores que corresponde a sete profundidades.

Cor	Profundidade
Branco	5,5 mm
Pink	7,0 mm
Verde	8,5 mm
Amarelo	10 mm
Azul	11,5 mm
Roxo	13 mm
Laranja	15 mm

Integração

O Kit Stop Drill não é um produto isolado — é um extensor de precisão para os kits Master Flex e Start Flex. Cada fresa, de 1 a 9, recebe o stop exato para a profundidade desejada, otimizando o procedimento e garantindo melhor posição tridimensional do implante na cavidade óssea.

Aplicação Comercial

Script de vendas — Framework SPIN Selling

- **Situação:** “Doutor, como sua equipe organiza a sequência de fresagem hoje para garantir que a profundidade planejada no software seja exatamente a executada em boca?”
- **Problema:** “O senhor já sentiu algum desconforto ou insegurança ao operar em regiões próximas ao nervo alveolar, confiando apenas na visualização das marcações a laser sob sangramento?”
- **Implicação:** “Se houver uma variação de apenas 1,5 mm por erro de leitura visual, quais seriam as implicações para o sucesso do carregamento imediato ou para a segurança do seu paciente?”
- **Necessidade de solução:** “Se eu lhe apresentasse um sistema de limitadores físicos, que travam na fresa e impedem qualquer avanço além do planejado, isso aumentaria sua velocidade e segurança cirúrgica?”

Contorno de objeções

- **Objeção — Durabilidade:** “Esses limitadores não perdem a pressão ou deformam na autoclave?” **Resposta:** o material utilizado é o Poliacetal (POM), dimensionalmente estável sob alta temperatura e umidade — não sofre deformação após os ciclos de esterilização.

- **Objeção — Complexidade:** “É mais um item para eu me preocupar na mesa.”
Resposta: na verdade simplifica — o kit segue a mesma lógica visual e numérica dos kits Master ou Start Flex; as cores, do branco ao laranja, criam um padrão intuitivo que agiliza o trabalho da auxiliar e evita erros de seleção de profundidade.

Conclusão estratégica

Vender o Kit Stop Drill é reforçar o compromisso da Conexão Implantes com a Engenharia de Previsibilidade — o acessório que transforma um kit de fresagem padrão em um sistema de alta precisão. Ao dominar a aplicação técnica (cores, profundidades e material POM), você deixa de ser um vendedor de peças para se tornar um parceiro da segurança clínica do cirurgião.

Fechamento

Leve a Engenharia de Previsibilidade para cada atendimento: apresente o Kit Stop Drill como o elo que troca a incerteza da medição visual por um travamento físico garantido na fresa. Kit Stop Drill — Conexão Implantes.

PRECISÃO QUE TRAVA NA FRESA

Leve a Engenharia de Previsibilidade para cada atendimento: apresente o Kit Stop Drill como o elo que troca a incerteza da medição visual por um travamento físico garantido na fresa. Kit Stop Drill — Conexão Implantes.

Conexão Sistemas de Próteses