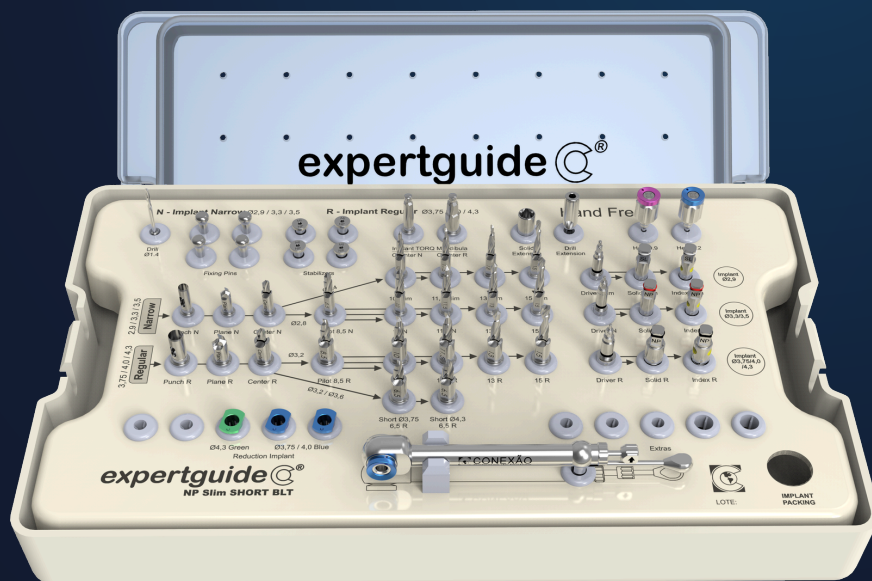




PRECISÃO TOTAL EM CIRURGIA GUIADA

O Kit ExpertGuide entrega inserção 100% guiada e indexação da anilha ao implante, eliminando ajustes manuais durante todo o ato cirúrgico.

Sumário

Abertura 3

Problema 3

Solução 4

Destaques 4

Composição/especificações 4

Aplicação 5

Fechamento 6

Abertura

Precisão Total em Cirurgia Guiada

O Kit ExpertGuide entrega inserção 100% guiada e indexação da anilha ao implante, eliminando ajustes manuais durante todo o ato cirúrgico.

Kit ExpertGuide — precisão matemática total em cirurgia guiada.



Este guia foi preparado para o consultor Conexão apresentar, com autoridade técnica, o Kit ExpertGuide — um conjunto de instrumentais para implantodontia posicionado como a solução definitiva para migrar do fluxo manual para a precisão matemática total, no portfólio da Conexão Digital Implant, líder em inovação guiada. As páginas a seguir trazem primeiro a camada didática — o porquê técnico do kit — e, na sequência, o argumento comercial para conduzir a conversa com o dentista.

Problema

O fluxo manual na implantodontia é dependente de ajustes. A folga de 5mm entre a anilha e o implante de diâmetro 3,75 ou 4,0 gera insegurança na inserção; a indexação fora do planejado obriga a ajustes manuais demorados na prótese; e, em extrações imediatas, o alvéolo aberto favorece o desvio de eixo quando não há osso para ancorar as fresas.

As consequências são diretas na rotina clínica: cada minuto de ajuste manual é lucro perdido no tempo de cadeira, e o desvio angular compromete a estética final em cargas imediatas.

Solução

O Kit ExpertGuide é o “motor de um ecossistema digital” que redefine eficiência na implantodontia. Pelo conceito **Hand Free (mãos livres)**, a tecnologia assume o controle tridimensional absoluto, eliminando a necessidade de intervenção manual para estabilizar fresas ou implantes durante o ato cirúrgico. O kit combina offset fixo de 9mm (fresa Plane), inserção 100% guiada (anéis redutores) e protocolo Coroa Pronta (anilha indexada + Chave Index) para entregar precisão milimétrica do planejamento à prótese.

Destaques

- **Conceito Hand Free (mãos livres):** a tecnologia assume o controle tridimensional absoluto, eliminando a intervenção manual para estabilizar fresas ou implantes durante o ato cirúrgico.
- **Offset fixo de 9mm:** garantido pela fresa Plane, estabelece a distância exata entre a anilha e a plataforma do implante, respeitando rigorosamente o planejamento biológico feito no software.
- **Inserção 100% guiada:** os anéis redutores (guias de implantes) eliminam a folga de 5mm das anilhas para implantes de diâmetro 3,75 ou 4,0 — o implante entra totalmente centrado e fiel ao eixo planejado.
- **Protocolo Coroa Pronta:** a anilha indexada + Chave Index (marcação amarela) resolvem a indexação mesial, distal e oclusal ainda com o guia cirúrgico em posição — entrega da prótese imediata.
- **Organização ergonômica:** kit organizado da esquerda para a direita em alvéolos fechados, guiando a equipe auxiliar e evitando erros operacionais.
- **Amplitude de diâmetros:** atende de Slim (2,9mm) até Regulares (4,3mm) em um único estojo.

Composição/especificações

Componentes críticos do kit:

Componente	Função
Fresa Plane	Determina o offset fixo de 9mm entre anilha e plataforma do implante
Anéis redutores	Guias de implante que eliminam a folga de 5mm das anilhas (implantes 3,75 e 4,0)
Anilha indexada	Indexação mesial, distal e oclusal com o guia cirúrgico em posição
Chave Index	Finalização manual (marcação amarela) do travamento do implante
Chave Driver	Descida motorizada do implante

Linhas de implantes atendidas (codificação por cores):

Linha	Diâmetro	Identificação	Indicação
Slim	2,9mm	Branca	Reabilitação em espaços protéticos limitados
Narrow	3,3 e 3,5mm	Vermelha	Anatomias estreitas com guia total
Regular	3,75 e 4,3mm	Preta	Casos universais com suporte a anéis redutores
Short	6,5mm (altura)	Preta	Regiões com limitação de altura óssea

Aplicação

O Kit ExpertGuide é indicado para cirurgia guiada em um amplo espectro de casos, do Slim (2,9mm) ao Regular (4,3mm), incluindo implantes Short de 6,5mm de altura — protocolo específico, ideal para evitar estruturas nobres como o nervo alveolar inferior em casos de pouca altura óssea.

Para **extrações imediatas**, a técnica **Top-Down (cima para baixo)** é essencial: o cirurgião inicia com fresas de diâmetro menor presas ao “tambor” da anilha — garantindo estabilidade onde não há osso, no vazio do alvéolo — e expande o diâmetro

somente após atingir a profundidade final, neutralizando o desvio de eixo em alvéolos abertos.

Script de vendas — Framework SPIN Selling (apoio ao consultor):

- **Situação:** pergunte ao dentista como ele garante hoje o respeito ao espaço biológico de 9mm entre anilha e plataforma do implante.
- **Problema:** traga a insegurança pela folga de 5mm anilha/implante 3,75 e os ajustes manuais na prótese por indexação fora do planejado.
- **Implicação:** cada minuto de ajuste manual é lucro perdido no tempo de cadeira, e o desvio angular compromete a estética final em cargas imediatas.
- **Necessidade de Solução:** apresente Hand Free + fresa Plane + anéis redutores + coroa pronta na hora.

Contorno de objeções (apoio ao consultor):

- “Meu kit atual já funciona” → pergunte se o sistema atual resolve a orientação mesial, distal e oclusal sem tirar o guia da boca; a anilha indexada + Chave Index fazem o paciente sair com coroa pronta, elevando o valor percebido.
- “Sistema de anéis redutores complexo” → destaque que o kit é referência em ergonomia, codificado por cores (Branca, Vermelha, Preta) + marca amarela nas chaves de finalização — um sistema à prova de erros.
- “Medo de desvios de eixo em extrações imediatas” → destaque a técnica Top-Down: fresa de diâmetro menor 100% presa no “tambor” da anilha, pique inicial com guia total e zero desvio no osso remanescente.

Fechamento

Leve o Kit ExpertGuide para a próxima conversa com o dentista: precisão matemática total em cirurgia guiada, do primeiro pique à coroa pronta. Use este guia como base técnica e o script SPIN como roteiro comercial para apresentar a solução com autoridade. — Conexão Digital Implant

PRECISÃO TOTAL EM CIRURGIA GUIADA

Leve o Kit ExpertGuide para a próxima conversa com o dentista: precisão matemática total em cirurgia guiada, do primeiro pique à coroa pronta. Use este guia como base técnica e o script SPIN como roteiro comercial para apresentar a solução com autoridade. — Conexão Digital Implant

Conexão Sistemas de Próteses