


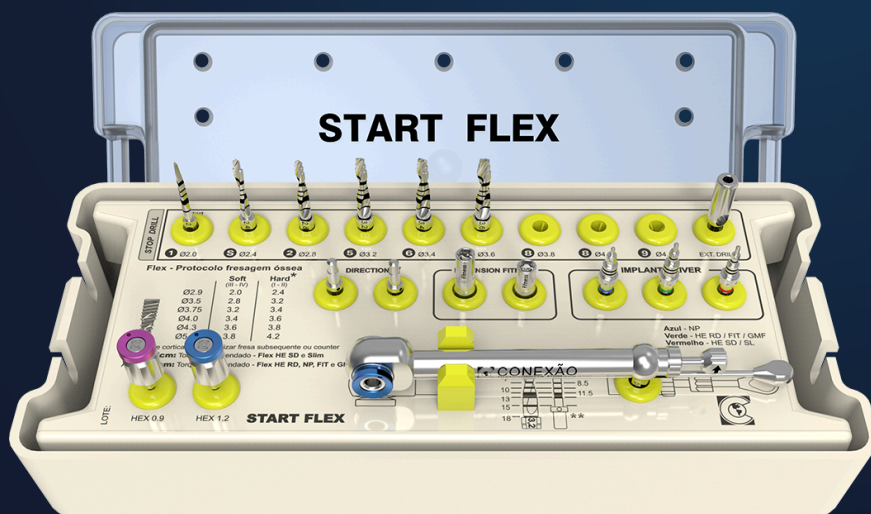

O GPS CIRÚRGICO DO CONSULTÓRIO

O Kit Start Flex cobre implantes de 2.9 a 4.0mm em qualquer plataforma (HE, NP, GMF ou FIT), com protocolo gravado na própria caixa.

Sumário

- Abertura 3
- Problema 3
- Solução 4
- Destaques 4
- Composição e Especificações 5
- Aplicação 5
 - Script SPIN Selling 6
 - Contorno de Objeções 6
- Fechamento 7


Abertura

O GPS Cirúrgico do Consultório

O Kit Start Flex cobre implantes de 2.9 a 4.0mm em qualquer plataforma (HE, NP, GMF ou FIT), com protocolo gravado na própria caixa.

O **Kit Start Flex** é o “GPS Cirúrgico” dos casos mais frequentes: um conjunto básico e introdutório, ideal para dentistas que buscam otimização de espaço e investimento sem abrir mão da versatilidade. Não é apenas um kit de fresas — é uma central de soluções que atende implantes de diâmetros **2.9, 3.3, 3.5, 3.75 e 4.0mm**, independentemente da plataforma (HE, NP, GMF ou FIT).

Este guia foi desenvolvido para municiar a força de vendas com argumentos técnicos, visuais e táticos, consolidando o Kit Start Flex como a solução de entrada e alta produtividade no consultório do implantodontista.

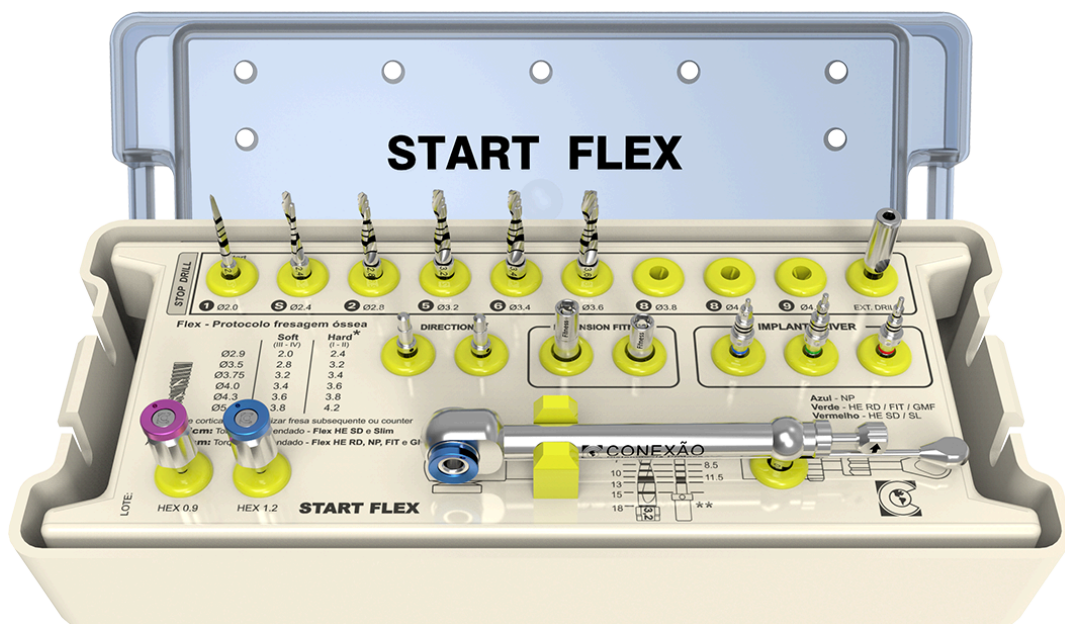

Problema

A rotina cirúrgica de quem atende diferentes sistemas (como NP e HE) depende da identificação manual do instrumental certo:

- Dificuldade e insegurança na hora de identificar a fresa correta para um osso mais duro ou de controlar a profundidade.
- Risco de confusão na escolha da chave e do driver de instalação, especialmente sob pressão de tempo.

- Torque inadequado e fresagem excessiva comprometem a osseointegração e reduzem a previsibilidade clínica.
- Instrumental espalhado em múltiplos kits exige espaço e investimento desproporcionais ao uso diário real.

Solução

O **Kit Start Flex** resolve essa rotina com eficiência:

- **Protocolo de perfuração gravado na própria caixa:** reduz o erro humano e aumenta a velocidade do procedimento.
- **Chaves e drivers com código de cores** (anéis O-ring): identificação imediata, sem confusão no ato cirúrgico.
- **Layout horizontal** que organiza as fresas da menor para a maior, facilitando o fluxo de trabalho.
- **Um único estojo** cobre implantes de 2.9 a 4.0mm em qualquer plataforma (HE, NP, GMF ou FIT), com a segurança da marca Conexão.

O resultado é o “GPS Cirúrgico” para os casos mais frequentes: o necessário para a grande maioria das cirurgias diárias, sem excesso de peças.

Destaques

- **Integração com Stop Drill:** o layout conversa diretamente com o kit de stop drill, permitindo o uso de limitadores de profundidade que garantem segurança absoluta ao dentista.
- **Marcações a laser precisas:** todas as fresas possuem marcações de **5.5 a 18mm**, correspondendo exatamente aos comprimentos dos implantes comercializados; tecnologia de alta durabilidade, visíveis mesmo após múltiplas esterilizações.
- **Leitura intuitiva:** simbologia inteligente na caixa organizadora — números em **negrito** (número da fresa) e em *itálico* (diâmetro da fresa).
- **Protocolo visível:** a sequência de perfuração está gravada na própria caixa, reduzindo o erro humano e aumentando a velocidade do procedimento.
- **Diferenciação por cores:** anéis O-ring nas chaves e drivers evitam confusão durante a cirurgia.

Composição e Especificações

Componente	Função
Chave Drive Roxa (0.9mm)	Específica para parafusos de cobertura (cover screw)
Chave Drive Azul (1.2mm)	Específica para cicatrizadores
Driver de instalação curto — anel azul	Captura implantes NP (24°)
Driver de instalação curto — anel verde	Sistema multi-compatível (HE-RD, FIT e GMF)
Driver de instalação curto — anel vermelho	Para implantes HE-SD e Slim
Chave catraca com referenciador de torque	Garante a estabilidade primária recomendada
Adaptador Fitness (Square)	Conecta a catraca aos drivers de captura para torque manual final
Extensor de fresa (extension drill)	Aumenta a haste para cirurgias entre dentes com pouco espaço

Diâmetros atendidos: 2.9, 3.3, 3.5, 3.75 e 4.0mm — em qualquer plataforma (HE, NP, GMF ou FIT).

Aplicação

O Kit Start Flex é o “coringa” do consultório, indicado para:

- **Amplitude de uso:** implantes estreitos e regulares em qualquer densidade óssea (Tipo I a IV).
- **Maxila específica:** instalação de implantes de **4.3mm** em ossos de menor densidade (Tipo III e IV).
- **Acesso facilitado:** extensor de fresa (extension drill) para aumentar a haste em cirurgias entre dentes com pouco espaço.
- **Torque recomendado:** até **45 Ncm** para sistemas Slim e até **60 Ncm** para NP, FIT e GMF — estabilidade primária sem risco ao componente.

Script SPIN Selling

Etapa	Abordagem sugerida
Situação	“Doutor, como o senhor organiza hoje o seu instrumental para cirurgias que envolvem diferentes sistemas como NP e HE?”
Problema	“O senhor já sentiu dificuldade ou insegurança na hora de identificar a fresa correta para um osso mais duro ou para controlar a profundidade?”
Implicação	“Essa confusão pode levar a um torque inadequado ou até ao comprometimento da osseointegração por fresagem excessiva, afetando sua previsibilidade clínica, correto?”
Necessidade	“Se eu lhe mostrasse um kit que já traz o protocolo de fresagem gravado na caixa e que centraliza todas as chaves de instalação com códigos de cores intuitivos, isso facilitaria sua rotina?”

Contorno de Objeções

- **“O kit parece simples demais, prefiro um kit completo.”** → O Start Flex foi desenvolvido para ser eficiente: cobre **90% das demandas de implantes de 2.9 a 4.0mm**. É a ferramenta ideal para cirurgias rápidas e precisas, evitando o excesso de peças que não são usadas no dia a dia.
- **“Posso usar qualquer torque com as chaves?”** → O kit é projetado para segurança: até **45 Ncm** para sistemas Slim e até **60 Ncm** para NP, FIT e GMF, garantindo estabilidade primária sem risco ao componente.
- **“As marcações das fresas apagam rápido?”** → As marcações são feitas a laser com tecnologia de alta durabilidade, variando de 5.5 a 18mm, com visibilidade garantida mesmo após múltiplas esterilizações.

Fechamento

Apresente o Kit Start Flex ao seu cliente: o GPS Cirúrgico dos casos frequentes — versatilidade de 2.9 a 4.0mm, protocolo de perfuração gravado na caixa e chaves codificadas por cores, com a segurança da marca Conexão. Fale com o time de produto Conexão para dúvidas técnicas adicionais. © Conexão Sistemas de Próteses

O GPS CIRÚRGICO DO CONSULTÓRIO

Apresente o Kit Start Flex ao seu cliente: o GPS Cirúrgico dos casos frequentes — versatilidade de 2.9 a 4.0mm, protocolo de perfuração gravado na caixa e chaves codificadas por cores, com a segurança da marca Conexão. Fale com o time de produto Conexão para dúvidas técnicas adicionais. © Conexão Sistemas de Próteses

Conexão Sistemas de Próteses